

Система угловых решений Straumann®

Гибкость и точность

для достижения

оптимального результата.





**ОРИГИНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**

Оцените преимущества
точной посадки и
качества оригинального
соединения Straumann®

В чем залог успеха?

Расширьте диапазон своих возможностей и оцените преимущества реставраций Straumann® с винтовой фиксацией. Гибкость и точность под другим углом.

В основе хороших результатов лежит гибкость. Система угловых решений Straumann® сочетает угловые винтовые шахты и первоклассную самоудерживающуюся отвёртку. Эту систему можно использовать при лечении широкого спектра патологий в переднем и боковых отделах, при этом она совместима как с цифровой так и с традиционными технологиями изготовления реставраций.

Точность и внимание к деталям играют ключевую роль. Мы усовершенствовали угловую винтовую шахту реставраций, чтобы вы смогли оптимально восстановить эстетику и функцию. Вне зависимости от имплантата угол наклона винтовой шахты может достигать до 25° в любом направлении. При этом винтовая шахта имеет минимально возможный диаметр, оставляя как можно больше места для реставрации. Надежное коническое винтовое соединение Straumann® и усилие закручивания в 35 Нсм обеспечивает крепкую фиксацию.

Откройте для себя угловые решения и используйте винтовую фиксацию там, где раньше была возможно только цементная фиксация.



ЛЕГКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Простой процесс работы, удобство в обращении



ЭСТЕТИКА

Угол наклона винтовой шахты до 25°. Малый диаметр винтовой шахты.



ГИБКОСТЬ

Любые показания, все платформы, цифровой и традиционные протоколы работы

Система Угловых Решений Straumann® (AS)


| Легкость применения


- Единая самоудерживающаяся отвёртка для всех платформ Straumann®
- Простой процесс работы с цементной фиксацией вне ротовой полости пациента
- Удобный доступ при повторных осмотрах



| Эстетика

- Угол наклона винтовой шахты до 25° позволяет изготавливать эстетичные реставрации с винтовой фиксацией
- Малый диаметр винтовой шахты оставляет больше пространства для реставрации и снижает риск сколов керамики

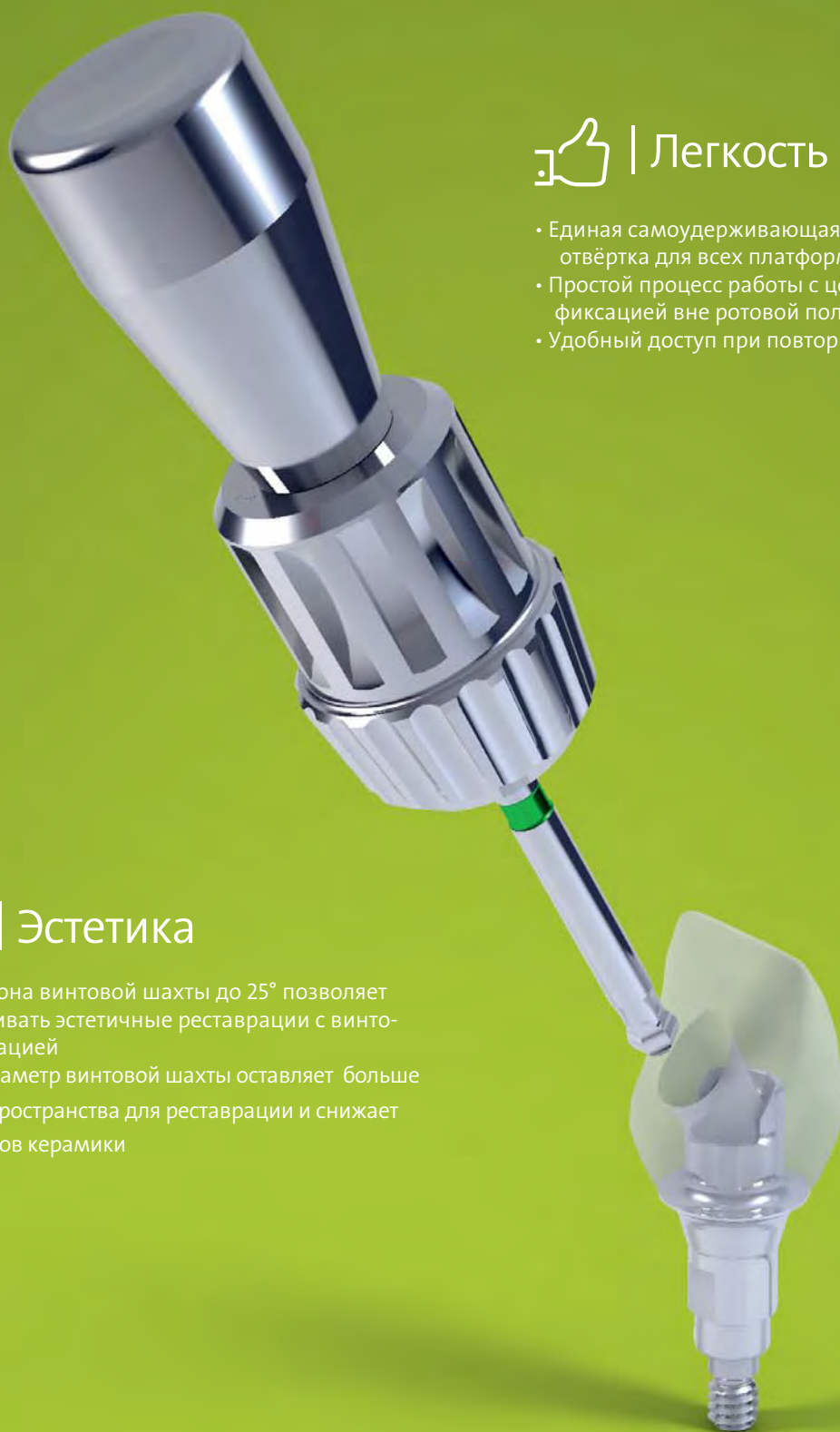



Гибкость

- Устранение дефектов в переднем и боковых отделах
- Одиночные коронки и мосты
- Все платформы имплантатов
- Традиционный и цифровой протоколы работы



Оригинальное соединение

- Точная посадка реставрации с оригинальным соединением Straumann



Абатмент Straumann® Variobase® для коронок AS

Оптимальная эстетика и легкий доступ под углом. Решение для одиночных реставраций с винтовой фиксацией.



ОПТИМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

- Сопоставима с реставрациями с цементной фиксацией
- Удобное обслуживание протеза
- Широкие возможности имплантации с учетом требований ортопедического этапа

ЛЕГКИЙ ДОСТУП И УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


- Идеальное положение выходного отверстия винтовой шахты обеспечивает прочность и долговечность реставрации
- Легкий доступ к винтовой шахте под наклоном в мезиальном направлении для пациентов с ограниченным раскрытием рта
- Улучшенная окклюзия

РАБОТА ПО ПРИВЫЧНОМУ ПРОТОКОЛУ

- Моделируйте реставрацию как вам удобно, используя цифровой или традиционный методы





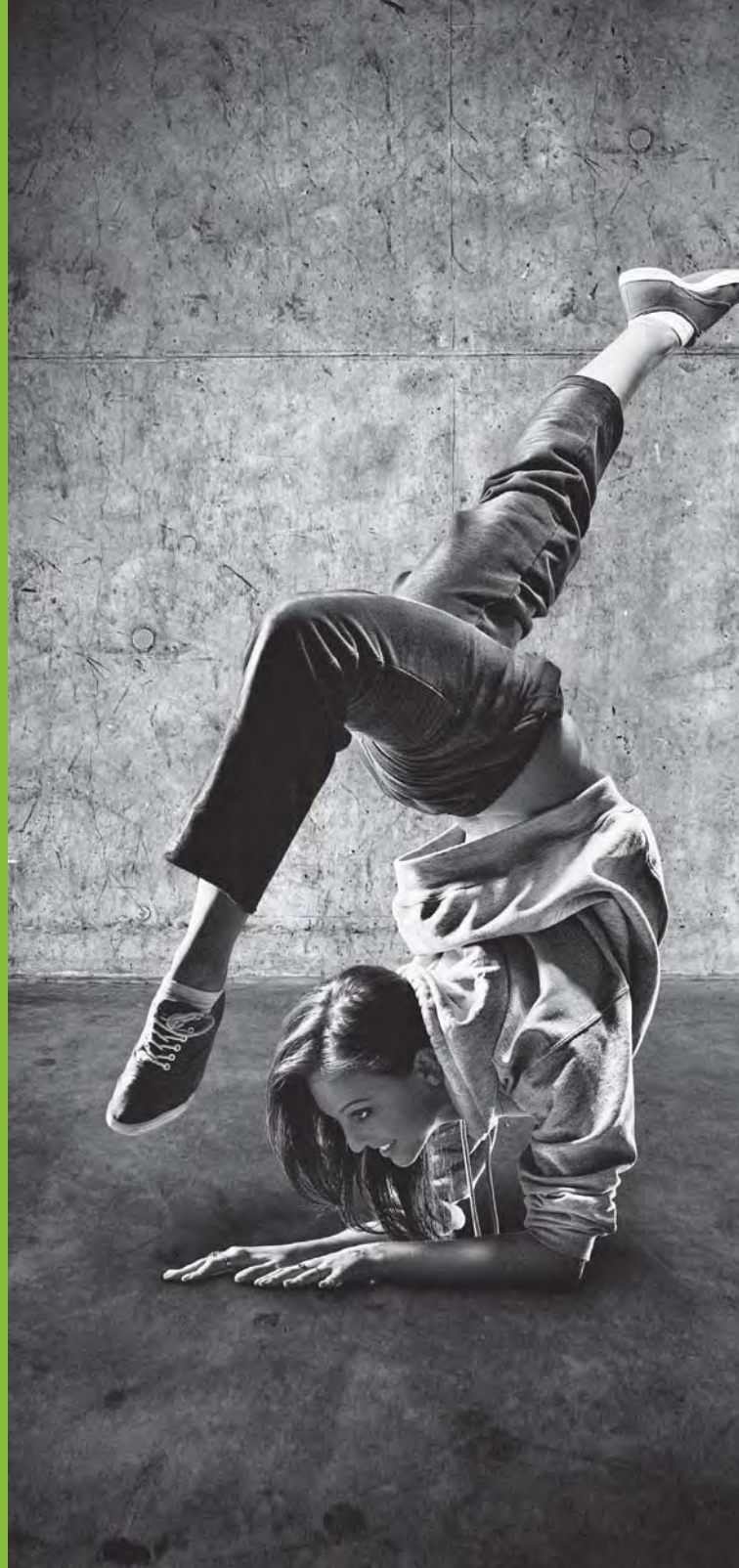








Выгорающие колпачки



ОБЗОР СИСТЕМЫ УГЛОВЫХ РЕШЕНИЙ STRAUMANN® VARIOBASE®

Ортопедические компоненты Variobase® доступны для следующих платформ имплантатов Straumann®:

	NC	RC		RN	WN	Инструменты для работы с абатментами Variobase® AS	
Аналоги							Отвертка для абатментов Variobase® AS под ключ-трещетку, длина 15 мм
	025.2101	025.4101		048.124	048.171	046.786	
Маячки для сканирования							Отвертка для абатментов Variobase® AS под ключ-трещетку, длина 21 мм
	025.2915	025.4915		048.168	048.169	046.787	
Абатменты Variobase® для коронок, угловые высота 3,5 мм							Отвертка для абатментов Variobase® AS под ключ-трещетку, длина 27 мм
	022.0084	022.0087		048.877	048.878	046.788	
Абатменты Variobase® для коронок, угловые высота 5,5 мм							Отвертка для абатментов Variobase® AS под угловой наконечник, длина 20 мм
	022.0093	022.0096		048.880	048.881	046.789	
Абатменты Variobase® для коронок, угловые высота 5,5 мм							Отвертка для абатментов Variobase® AS под угловой наконечник, длина 26 мм
	022.0093	022.0096		048.880	048.881	046.790	
Выгорающие колпачки для абатментов Variobase для коронок, угловые							Отвертка для абатментов Variobase® AS под угловой наконечник, длина 32 мм
	023.0025	023.0026		048.897	048.898	046.791	
Дополнительные винты для абатментов Variobase для коронок							Вспомогательный удерживающий компонент для отверток 046.786/787/788
	025.0055			048.906		046.792	



За дополнительной информацией о продукции обращайтесь к региональному представителю Straumann или посетите сайт www.straumann.ru

Центральный международный офис

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 9 65 1111
Fax +41 (0)61 9 65 1101
www.straumann.com

Национальный дистрибьютор в России

ООО „Штрауманн“
119571, Москва
Ленинский проспект, 119А
Тел.: +7 495 139 74 74
Факс: +7 495 139 74 75
www.straumann.ru

